



## Bedienungsanleitung für das Hausnotruf-System ct '1-D

# Gerät plus Handsender

Ihr wichtigstes Bedienelement ist der wasserdichte Handsender. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie ihn ständig am Körper tragen oder zumindest, z.B. nachts, greifbar aufbewahren. Die favorisierte Trageart ist die Trageart „Kette“, d.h. Sie tragen den Handsender wie eine Kette um den Hals und können ihn jederzeit mit beiden Händen greifen. Alternativ sind die Tragearten „Uhr“ und „Clip“ möglich.

Das Tastenfeld des Gerätes besteht aus drei Tasten. **Die gelbe „Alles in Ordnung-Taste“** mit dem Symbol einer Sanduhr für die fließende Zeit und die ständige Wiederholfunktion.

**Die grüne „Ab- und Anmelde-Taste“** mit dem Symbol eines Koffers für „Ich habe die Wohnung verlassen und möchte die Funktion der gelben „Alles in Ordnung-Taste“ bis zum Zeitpunkt meiner Rückkehr ausschalten.

**Die rote „Hilfe“-Taste** mit dem Symbol eines Telefonhörers für die Sprechverbindung zur Zentrale.

## Die rote „Hilfe“-Taste

Sofort, wenn Sie die rote Taste am Gerät oder den Knopf am Handsender drücken, wählt das Gerät die Zentrale an.

## Die gelbe „Alles in Ordnung“-Taste

Direkt morgens nach dem Aufstehen drücken Sie bitte einmal auf die gelbe „Alles in Ordnung“-Taste. Innerhalb eines Tages, genauer gesagt, innerhalb von 26 Stunden, muss diese Taste mindestens einmal betätigt werden. Andernfalls wählt das Gerät automatisch die Zentrale an.

Falls Sie es einmal vergessen sollten, ertönt ein lautes akustisches Signal „*Drücken Sie bitte die gelbe Taste*“ und die Taste leuchtet konstant auf. Sie können innerhalb dieser Zeit noch die Taste drücken, um der automatischen Anwahl zuvor zu kommen.

Sollten Sie zweifeln, ob Sie diese Taste „*heute bereits betätigt haben*“, können Sie unbesorgt auch mehrfach am Tag drücken.

Die Funktion der „Alles in Ordnung“-Taste – auch Sicherheitsuhr genannt – sichert Sie zusätzlich ab. Sollten Sie einmal in Not geraten und können nicht den Handsender drücken, bietet diese Funktion zusätzliche Sicherheit.

## Die grüne „Ab- und Anmelde“-Taste

Immer wenn Sie über Nacht Ihre Wohnung verlassen und nicht in der Lage sind, rechtzeitig am nächsten Morgen die gelbe „Alles in Ordnung“-Taste zu drücken, betätigen Sie bitte die Abmeldetaste. Nach der Abmeldung blinkt die grüne Taste dauerhaft.

Während Ihrer Abwesenheit ist die Funktion der Sicherheitsuhr über die gelbe „Alles in Ordnung“-Taste ausgeschaltet.

Kehren Sie in die Wohnung zurück, melden Sie sich bitte durch Drücken der Anmelde-Taste wieder an. Die grüne Taste erlischt und die Funktion der Sicherheitsuhr über die gelbe „Alles in Ordnung“-Taste wird wieder eingeschaltet.

# Technische Störungen

Beim Auftreten von technischen Störungen gibt das Gerät einmalig eine akustische Meldung ab und die gelbe Taste blinkt dauerhaft für den Zeitraum der Störung.




*„Störung Telefonleitung“  
„Störung Netzspannung“*

Sofern Sie die akustische Meldung nicht verstanden haben, können Sie die Meldung durch Drücken der gelben Taste wiederholen.



# Reinigung des Gerätes und des Handsenders

Zur Reinigung des wasserdichten Handsenders verwenden Sie bitte ausschließlich lauwarmes Wasser, versetzt mit einer leichten Handseife oder einem Geschirrspülmittel. Das Gerät ist nicht wasserdicht und darf nur leicht mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt werden.

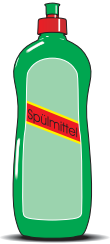

**Ausdrücklich nicht verwendet werden dürfen:**

**alkoholhaltige Reinigungsmittel,  
essighaltige Reinigungsmittel,  
Glasreiniger,  
Desinfektionsmittel und andere aggressive Mittel!**



# Ablauf eines Hilferufes


Sie drücken auf den Knopf des Handsenders oder die rote „Hilfe“-Taste am Gerät.

Das Gerät bestätigt Ihr Auslösen durch ein akustisches Signal und die „Hilfe“-Taste leuchtet konstant auf.

Es dauert nur wenige Augenblicke und die Sprechverbindung zur Zentrale ist hergestellt. Deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich aufmerksam um Ihr Anliegen und leiten evtl. notwendige Hilfs- und Rettungsmaßnahmen unverzüglich ein.

... „Hilferuf  
Handsender“ ...

... „Hier spricht  
die Hausnotruf-  
Zentrale“ ...

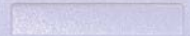

Ab- Anmelden



Hilfe

Dieses Gerät ist Eigentum von:



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner:

